


# 间硝基苯磺酸酯类化合物

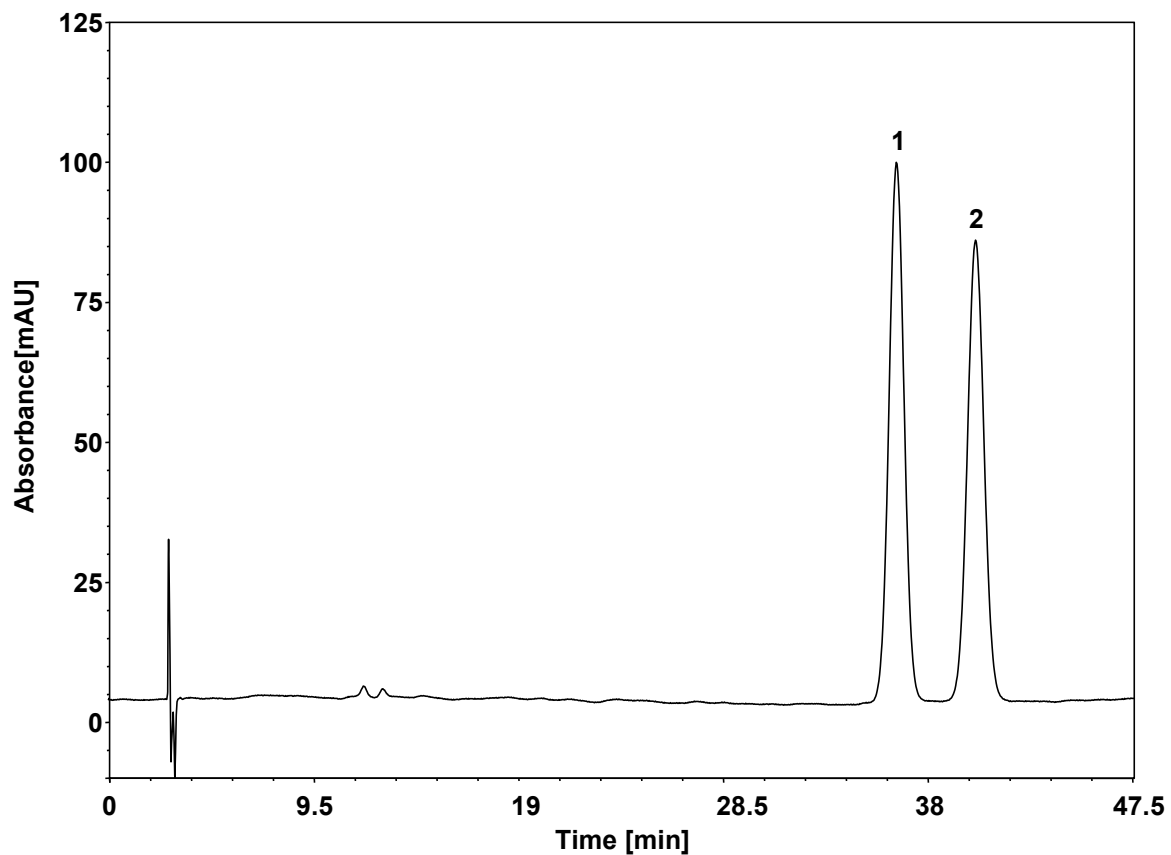

Column: ChiralCore Amy-S, 5  $\mu$ m  
Dimension: 4.6  $\times$  250 mm  
Mobile Phase: 85/15 v/v 正己烷/乙醇  
Flow Rate: 1 mL/min  
Temperature: RT  
Injection: 10  $\mu$ L  
Detection: UV 260 nm  
Sample: 间硝基苯磺酸酯类化合物 (0.5 mg/mL乙醇溶解)

组分	保留时间 (min)	理论塔板数 (USP)	拖尾因子 (USP)	分离度 (USP)
1	36.498	12287	1.24	/
2	40.157	12428	1.05	2.65