


非萘利酮 (Finerenone)

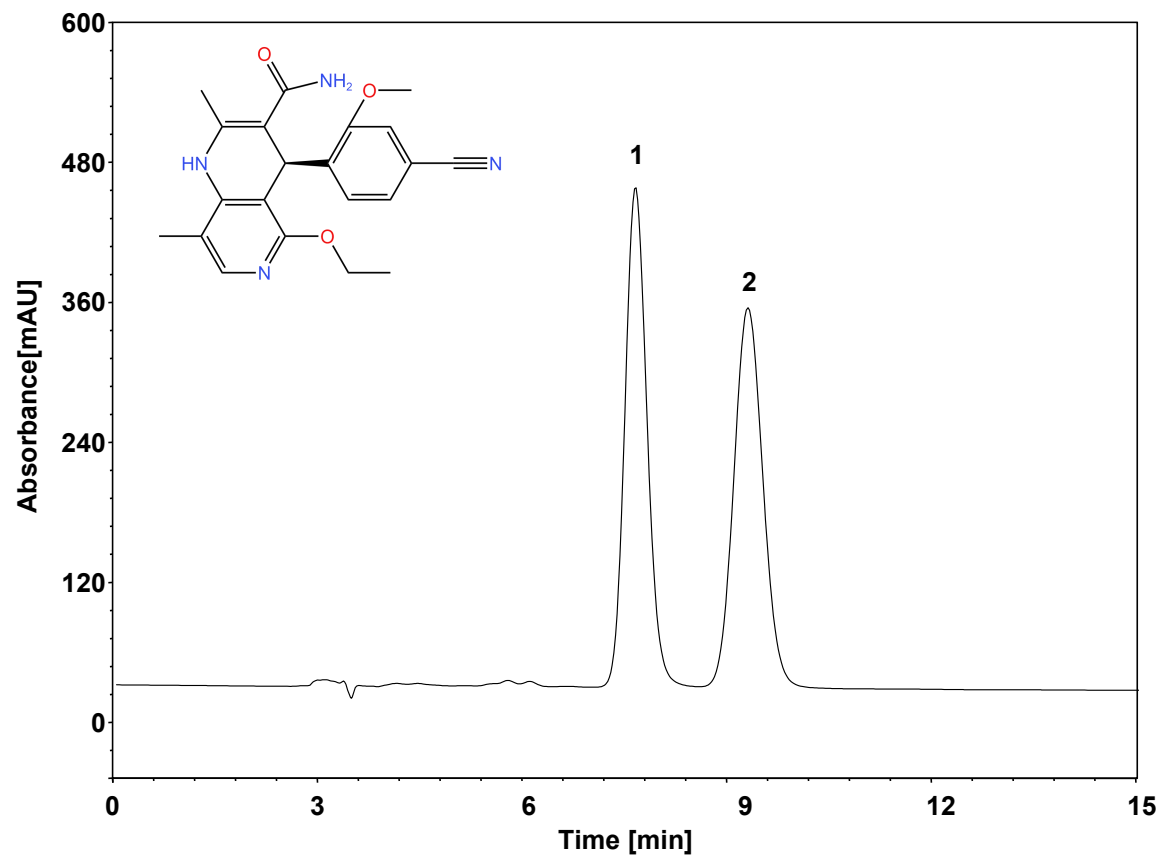

Column: ChiralCore Amy-Z, 5 μ m
Dimension: 4.6 \times 250 mm
Mobile Phase: 70/30 v/v 正己烷/异丙醇
Flow Rate: 1 mL/min
Temperature: 30 $^{\circ}$ C
Injection: 10 μ L
Detection: UV 254 nm
Sample: 非萘利酮 (0.5 mg/mL, 甲醇溶解)

| 组分 | 保留时间 (min) | 理论塔板数 (USP) | 拖尾因子 (USP) | 分离度 (USP) |
|----|------------|-------------|------------|-----------|
| 1 | 7.620 | 2686 | 1.122 | / |
| 2 | 9.272 | 2237 | 1.072 | 2.410 |