


益母草颗粒 (中国药典)

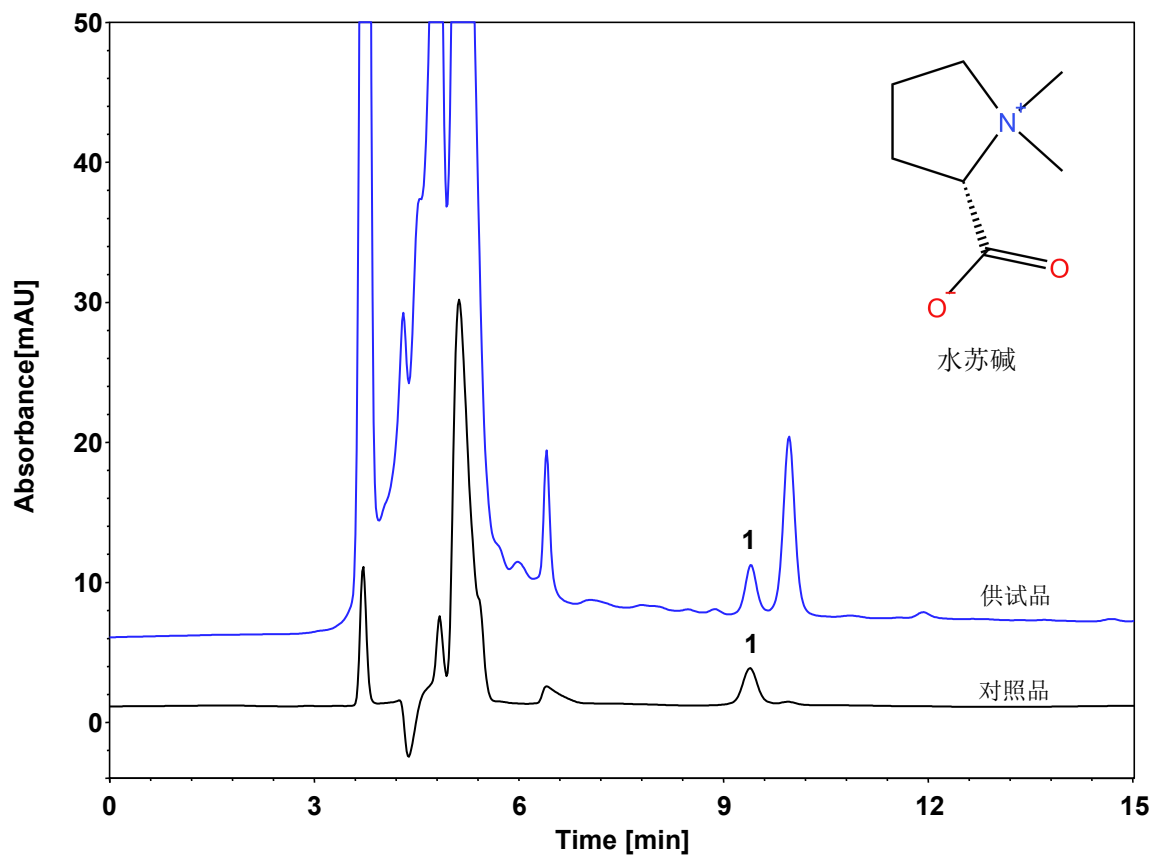

Column: ChromCore SCX, 5 μ m
Dimension: 4.6 \times 250 mm
Mobile Phase: 15/85/0.15 v/v 乙腈/0.05 M 磷酸二氢钾溶液/磷酸
Flow Rate: 0.7 mL/min
Temperature: 25 $^{\circ}$ C
Injection: 10 μ L
Detection: UV 192 nm
Instrument: Waters e2695
Sample: 益母草颗粒
Peak: 1. 水苏碱

组分	保留时间 (min)	理论塔板数 (USP)	拖尾因子 (USP)	分离度 (USP)
水苏碱	9.389	15164	1.02	1.68